


Kde vyberu jinou Beátu?

Domov je nastavený automaticky. Vybíráte jen konkrétní Beátu.

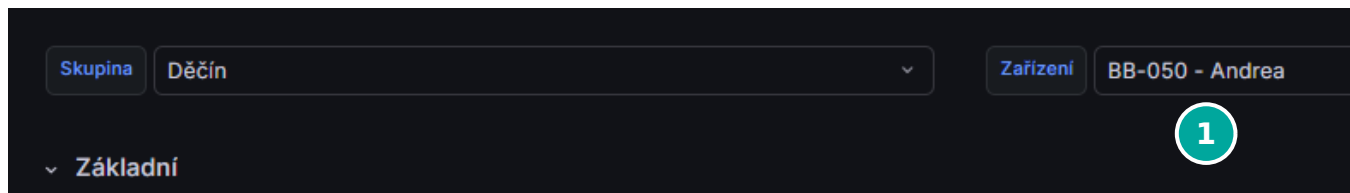

Skupina Děčín

Zařízení BB-050 - Andrea

1

▼ Základní

1 Zařízení = konkrétní Beáta

Klikněte do pole vedle slova **Zařízení**. Vyberte Beátu podle čísla a názvu. Na obrázku je **BB-050 - Andrea**. Po změně vyčkejte na načtení grafů. Váš domov má jednu skupinu, proto ji nevybíráte ani neměníte.

Než začnete číst graf, nahlas si řekněte: „**Dívám se na správnou Beátu a správné období.**“


Jak se vrátím na začátek?

V horní liště klikněte na tlačítko **Přehled** s ikonou čtyř čtverečků. Vráťte se do hlavního přehledu. Jeho polohu najdete označenou na následující straně.

Původní odkaz do přehledu svého domova si můžete uložit také mezi záložky prohlížeče jako Beáta - úvodní přehled.

Návrat a výběr času

Vyberte si celý den, poslední hodiny nebo přesný úsek.

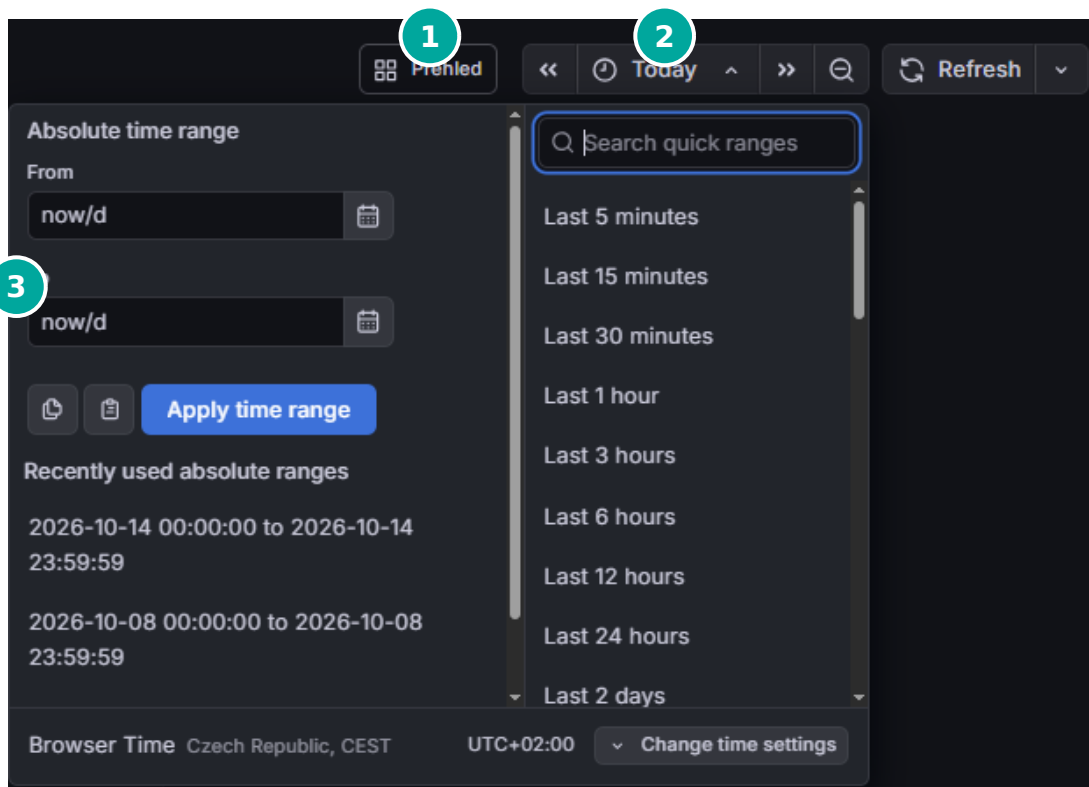

1 Přehled = zpátky do hlavního menu

Klikněte na **Přehled** v horní liště. Tlačítko poznáte také podle ikony čtyř čtverečků.

2 Časové období = tlačítko s hodinami

Na snímku je **Today** (dnes). Kliknutím otevřete výběr: například **Last 1 hour** (poslední hodina) nebo **Last 24 hours** (posledních 24 hodin).

3 Vlastní začátek a konec


Vlevo nastavte **From** (od) a **To** (do), případně použijte ikony kalendáře. Potvrďte modrým tlačítkem **Apply time range**.

Přiblížení přímo v grafu

V grafu podržte **levé tlačítko myši** na začátku vybraného úseku, táhněte doprava a tlačítko pusťte. Úsek se přiblíží. Pro návrat na celý dnešní den znovu otevřete výběr času a vyberte **Today**.

Který pohled mám otevřít?

Začněte přehledem. K podrobnostem přejděte, když vás něco zaujme.

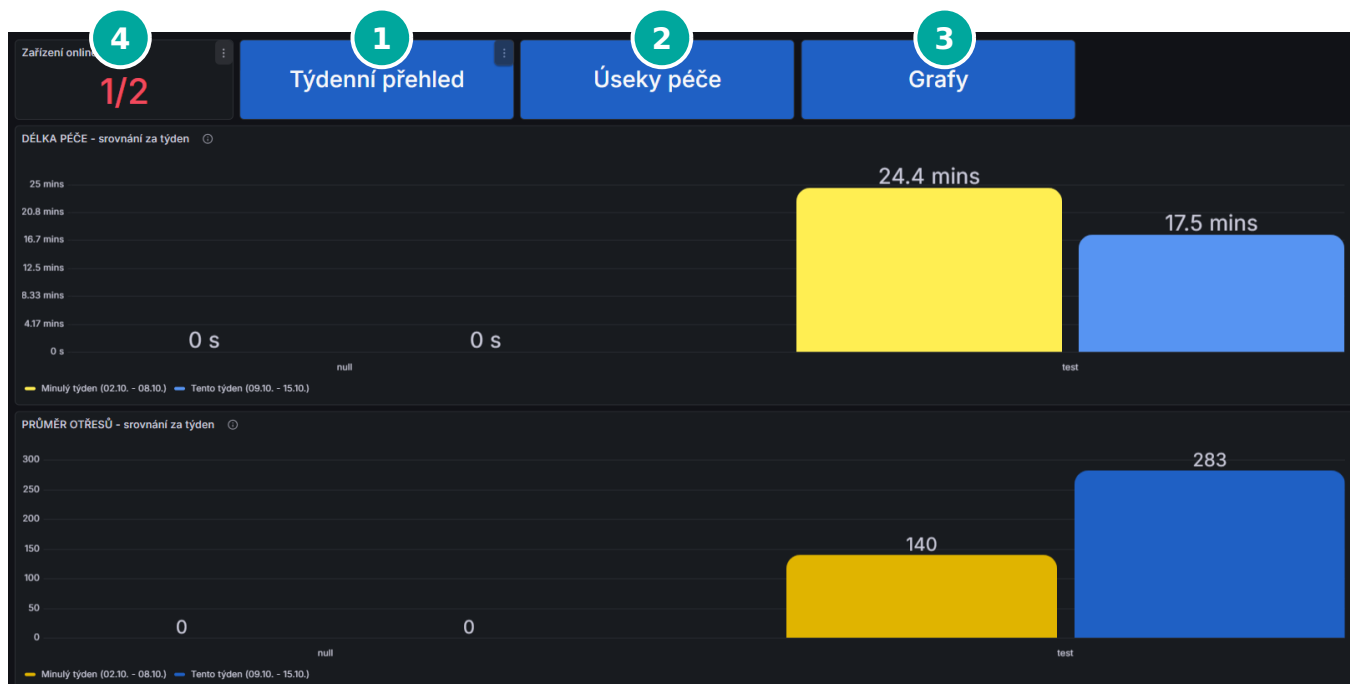

1 Týdenní přehled

Klikněte na modré tlačítko **Týdenní přehled**. Pomůže vám zorientovat se v průběhu jednoho týdne.

2 Úseky péče

Klikněte na **Úseky péče**, když chcete zjistit, kdy systém zaznamenal jednotlivé úseky a jak dlouho trvaly.

3 Grafy

Klikněte na **Grafy**, když chcete prozkoumat otřesy a další naměřené údaje podrobněji v čase.


4 Zařízení online

Údaj **1/2** na snímku znamená, že systém právě hlásí online jednu ze dvou Beát. Neříká, zda druhá měřila po celý minulý týden.

Obrazovka na snímku ukazuje srovnání dvou týdnů. Názvy tlačítek a nadpis konkrétního grafu čtete zvlášť: tlačítka slouží k přechodu do dalších pohledů.

Jak čtu graf otřesů?

Zleva doprava plyne čas. Směrem nahoru roste naměřená intenzita.

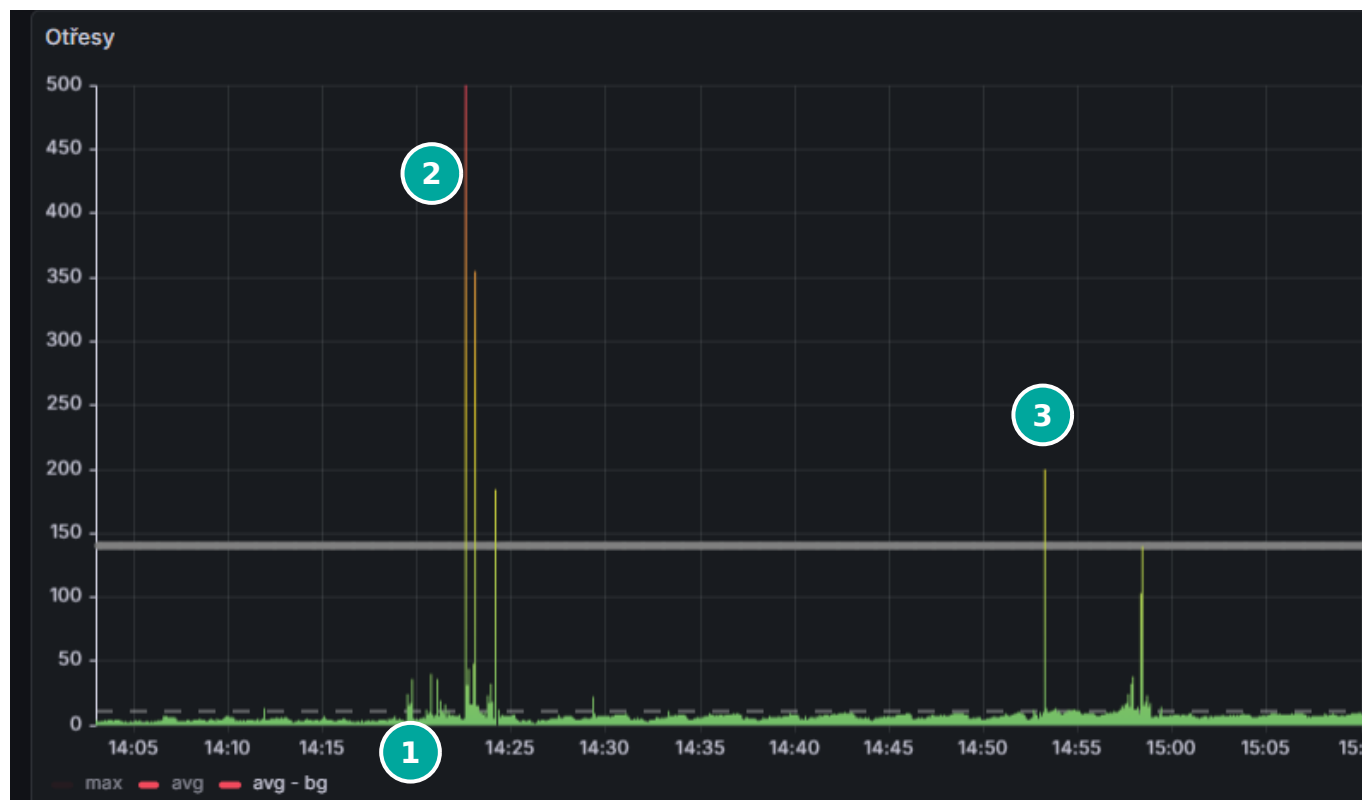

1 Dole je čas

Například 14:20 nebo 14:25. Nejprve si najděte dobu, kterou chcete prozkoumat. Vpravo je později, vlevo dříve.

2 Vyšší špička = silnější zachycený otřes

Kolem **14:22-14:24** vidíte několik výrazných špiček. Výška ukazuje intenzitu signálu; sama o sobě neudává délku péče.

3 Rozlišujte výšku a šířku v čase

Kolem **14:53** je další krátká špička. Úzký vysoký vrchol znamená krátký výrazný otřes. Delší dění zaujímá širší úsek časové osy.

Krátké výrazné otřesy mohou upozornit na hrkání. Delší šetrná manipulace může odpovídat klidné péči. **Co se u lůžka skutečně dělo, ověřujeme s týmem.** Také pohyb klienta nebo lůžka může změnit signál.

Co mi čísla opravdu říkají?

Nejdřív ověřte měření. Potom hledejte souvislosti s péčí.

Barvy týdnů čtěte podle legendy

Na přiloženém srovnání je **žlutě minulý týden (02. 10.-08. 10.)** a **modře tento týden (09. 10.-15. 10.)**. V jiném grafu mohou mít barvy jiný význam.

Příklad přímo ze snímku

U položky **test** je zobrazená délka péče **24,4 minuty** a **17,5 minuty**. Průměr otřesů je **140** a **283**. To je důvod podívat se na konkrétní dny a úseky. Samotné srovnání ještě nevysvětluje, proč se hodnoty změnily.

Délka péče: systém zachytil určité úseky

Zobrazený čas se odvozuje ze zachyceného signálu. Nezahrnuje automaticky každou podobu péče: například rozhovor u lůžka může proběhnout bez výraznějšího pohybu. Více minut samo o sobě neurčuje lepší péči.

Nula a chybějící data jsou různé věci

Když vidíte **0**, nejprve ověřte správný výběr, časové období a dostupnost měření. Nápis **null** na snímku není jméno Beáty: označuje chybějící hodnotu v dané položce. Nulu proto nečteme automaticky jako „nikdo nepečoval“.

Tři otázky pro společné čtení

1. Co v grafu vidíme?
2. Co se tehdy dělo u konkrétního člověka?
3. Co fungovalo dobře a co můžeme zkusit příště?

Podklad: dodané snímky obrazovky, Technický manuál Beáta a Průvodce zavedením.